

fiera®

USER GUIDE

取扱説明書

フィエラ® が作り出す違いを感じよう

フィエラ®を手に入れたことで、あなたはパートナーとの親密な関係をよりステップアップさせる最初の一步を踏み出したのです!

フィエラ®の類を見ないデザインが、身体的高揚をもたらし、セックスへの関心を高めてくれることは科学的に証明されています。

フィエラ® 最初の使用前に、少しの時間を使ってこのユーザーガイドを読むことで、最高の結果を得ることができるでしょう。

目次

安全性情報	3
フィエラ®について	4
フィエラ®を使う	6
フィエラ®の取り外し及び清掃	9
フィエラ®リモコンの使い方	10
フィエラ®のアクセサリ	10
トラブルシューティング	11~12

安全性情報

〈充電および洗浄の適切な方法〉

- ◆ フィエラ®を充電中に操作することはできません。
- ◆ 充電中に清掃しないようにしてください。また、充電前にフィエラ®が完全に乾いていることを確認してください。
- ◆ フィエラ®の充電は、必ず専用の充電ケーブルとユニバーサル(国際仕様)電源で行ってください。
- ◆ フィエラ®の清掃中に、水に浸さないようにしてください。
- ◆ バスタブやシャワーの中でフィエラ®を使用しないでください。

〈フィエラ®+リモート製品〉

- ◆ リモコンの清掃には、湿った布や抗菌ワイブをご使用ください。リモコンを流水の中に置いたり、水に浸けたりしないでください。

【注意】

間違った種類の電池を入れると爆発のリスクがあります。リモコンの電池は所定の方法に従って廃棄してください。

〈ある種の疾患に罹患している場合は使用しないでください。〉

- ◆ 痛みや不快感がある場合は使わないでください。使い過ぎや不適切な場所への使用により、皮膚の炎症や痛み、打ち身などが起こる可能性があります。
- ◆ 傷や腫れ、炎症のある皮膚、あるいはヘルペス(帯状疱疹)が出ている場合は使用しないでください。
- ◆ 妊娠中や持病がある場合は、使用前にかかりつけの医師に相談してください。
- ◆ この製品は、肉体内、視覚面や精神面で問題のある方向けのアイテムではありません。

〈指示通りに使用してください〉

- ◆ 他人とフィエラ®やソフセンス™を共用しないでください。
- ◆ フィエラ®は大人専用です。
- ◆ フィエラ®を他の穴に入れないようにしてください(口、鼻、肛門など)。
- ◆ フィエラ®は体外専用です。

あなたのフィエラ®を知りましょう

(同梱されているもの)




フィエラ®の働き:フィエラ®を使ってみる

最初の4週間は、最低週1回の頻度でフィエラ®を使うことをおすすめします。そうすることで、フィエラ®の使用に慣れ親しむことができます。使用テストの結果からは、4週間の使用後からよりはっきりした変化が認められることがわかっています。

フィエラ®は、セックスの前に5~15分使用してください(最大20分までフィエラ®を使用することで、最大限の快感を得られる女性もいます)。気持ちが高揚したらそのまま外してください。フィエラ®はセックスの準備をするために作られたものであり、オーガズムに達するためのものではありません。

フィエラ®をクリトリスの上に置き、優しい吸引力によって身体に密着する柔らかいシリコンリング(ソフセンス™リング)によって固定することができます。

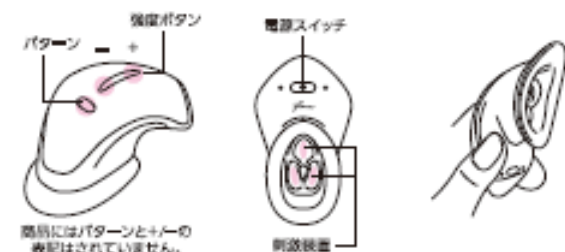

フィエラ®の上部には、刺激の強さとパターンを操作するボタンがあります。それらのボタンを使って、一番あなたに合う設定を見つけてください。


【注意】
あなたの身体に吸着させるため、フィエラ®を体に押し付ける必要があります。しっかり体に密着しないと、最大限の刺激を引き起こすことはできません。

ソフセンス™ リングの働き

ソフセンス™ リングはクリトリスのまわりを優しく囲み、フィエラ®の刺激とあなたの身体の間に優しいバリアを作り出します。リングと体との間の優しい吸着によって、フィエラ®が体に固定されます。あなたの身体に接するすべての部分には、身体に安全で、毒性のない、フタル酸フリーの素材が使われています。

〈ソフセンス™リングのメンテナンスと再補充〉

ソフセンス™リングは洗浄可能であり、5回まで再使用可能です。リングが摩擦すると、しっかり密着させることが困難になってしまいます。

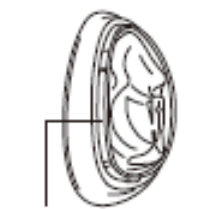

〈正確な密着のために〉

フィエラ®キットには、ホワイトとクリアの2つのソフセンス™リングが付いています。

まず始めにクリアタイプのリングを試してみることをおすすめしますが、両方試してどちらが好みに合うのかをチェックしてみてください。どちらのリングがよりあなたに合うのかを見つけるために、何度か試してみる必要があります。

LEDライトの働き

LEDライトは電源ボタンの上にあり、以下の情報を含め、フィエラ®の状態を表します。

● 充電状態 ● 体と上手く密着しているか

LEDの色の意味)

ながっている場合

電で使用準備完了

充電器につながっていない場合

● 緑の点滅 ● フル充電で使用準備完了

● 赤の点灯 ● 充電が必要

● 赤の点滅 ● オーバーヒート 5分間電源を切って再度スタートしてください

● ピンクの点滅 ● 体との密着を作り出している途中

● ピンクの点灯 ● 体との密着完了



フィエラ®を使う

〈フィエラ®がフル充電されていることを確かめる〉

フィエラ®は毎回使用前に充電してください。フル充電までに約3時間かかります。

- ① 充電時にフィエラ®が完全に乾いていることを確かめてください。
- ② 小さな四角いプラグ(ユニバーサル電源)にUSB端子を挿入し、電源ケーブルを壁の電源につなげてください。
- ③ 図のように、電源コネクタをパワーボタンの上にセットしてください。そしてもう一方を電源高力に接続してください。



充電中は、LEDライト(電源コネクタの下に位置)が緑の点滅になります。充電が完了すると、LEDは緑の点灯に変わります。毎回使用後にフィエラ®を充電しておく、いつでも好きな時に使うことができます!

ソフセンス™ リングを装着する

- ① ソフセンス™リングは使用前にフィエラ®に必ず取り付けてください。
- ② ソフセンス™リングを丁寧に観察し、どこかにひびや傷がないことを確認してください。
- ③ ソフセンス™リングの細い方が電源ボタンの方に、四面が外側(フィエラ®から遠い側)になるよう配置します。



- ④ しっかりとはまり込むまで、リングの端をフィエラ®の溝に強く押し込みます。使う前にソフセンスリングがしっかりとはまり込んでいることを確認してください。

【注意】
もしソフセンス™リングが正確にはまっていると、ピンサイズの穴がきれいに見えるようになります。



フィエラ®を体に装着する

フィエラ®の使用説明ビデオ「使い方」および「装着の仕方」を以下のサイトから映像をご覧になることをおすすめします。
<https://www.fiera.jp>

通常、フィエラ®を5～15分使うことで、性的興奮を得ることができます。最大20分までフィエラ®を使用することで、最大限の快感を得られる女性もいます。もし、肉体的に準備ができたと感じたら（はてり、うずき、激しさなど）、そのままフィエラ®を外してください。

① 快適な場所を探して横になってください。



② 膣の領域の解剖を知り、陰唇とクリトリスの位置を確認しましょう。鏡を使うとわかりやすいです。

③ ウォーターベースの潤滑剤もしくは水を、エンドウ豆サイズの量取って、ソフセンスリングの外縁およびあなたの陰唇およびクリトリスのまわりに塗ってください。使用後は、フィエラ®に付いたすべての潤滑剤をきれいにふき取ってください。



【注意】製品を傷めますのでシリコン系の潤滑剤は使わないようにしてください。

④ 電源ボタンを押し、フィエラ®の電源を入れてください。



⑤ 片子を使い、LEDライトが見えるようにフィエラ®を陰唇の方に向けて持ってください。もう一方の手で外陰器を広げてください。



⑥ ソフセンス™ リングを外陰器と小陰唇の間に挿入してください。



【注意】フィエラ®のどの部分も膣口の中に入れてはいけません。

密着できているかの確認

フィエラ®を置いたら、軽くフィエラ®を押しつけてください。フィエラ®が優しく吸着を始めます。フィエラ®が体に密着するために動き出し、パルス（拍動）を感じるようになります。もし密着がうまく行けば、パルスの振動から、ソフトでコンスタントな刺激パターンに変化します。あなたの身体にしっかりと密着し、快適に感じるまで、フィエラ®は片手で固定しておいてください。

フィエラ®があなたの身体に密着するまでの間は、LEDはピンクの点滅になっています。うまく密着が完了すると、LEDはピンクの点灯に切り替わります。

ソフセンス™ リングのソフトな内側の部分は、クリトリスを快適にカバーし、小陰唇の上側に位置していなければなりません。フィエラ®が尿道口や膣口をカバーしないよう、高い位置に位置していることを確認してください。




もしフィエラ®がうまく体に密着しないと、充電の節約のため、1分で自動的に電源が落ちます。再度トライするときは電源ボタンを押してください。

刺激を感じる


フィエラ®が体にうまく密着すると、自動的に一番強い刺激が「トリオパターン」で始まります。パターンと強度を変えて設定のカスタマイズを行うことができます。設定を変える際には、フィエラ®を固定しておくようにしてください。



刺激パターンは、「トリオ」「V」「サークル」の3パターンがあります。パターンボタンを押すことで刺激パターンを切り替えることができます。

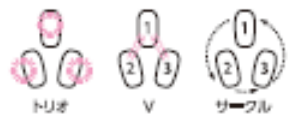

それぞれのパターンで、弱から強まで強度を変えることができます。ブースト(Boost)モードはトリオパターンの強度が最も強いモードです。セッティングの後に、もう一度もっとも強度の高いボタン(「+」ボタン)を押すことで、どのパターンからでもブーストモードに変更することができます。

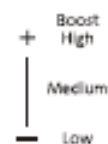

【注意】フィエラ®を最大強度で使い続けると、オーバーヒートを起こす可能性があります。もしオーバーヒートを起こしたら、5分間電源をオフにした後、再度電源をオンにし、使用を再開してください。

フィエラ®の取り外し及び清掃

〈体からフィエラ®を外す〉

フィエラ®を外すには、密着を解除するためにフィエラ®を傾けて、体から引いて取り外してください。体から外す前に電源をオフにする必要はありません。取り外した後は、フィエラ®は1分で自動的にオフになります。

〈ソフセンス™ リングを外す〉

使用後にフィエラ®からソフセンス™ リングを外すには、リングの上部と下部を内側に押しつぶすようにつまんで、ゆっくり優しく引き抜いてください。ソフセンス™ リングにダメージを与えないように、片側だけつまんで引き抜かないようにしてください。



フィエラ®とソフセンス™リングの清掃および保管

フィエラ®は、毎回使用後にきれいにしておいてください。

〈清掃方法〉

- ソフセンス™リングを、洗剤と水で優しく洗います。
- フィエラ®を、きれいな濡った布で優しく拭きとるか、流水の下ですべての面をきれいにしてください。(電源ボタンは濡らさないようにしてください)
- もしウォーターベースの潤滑剤を使った場合は、目詰まりや吸着力の低下を防ぐため、綿棒を使ってフィエラ®のフィルターを完ぺきに清掃してください。
- フィエラ®とソフセンス™リングを、きれいな乾燥した場所に置き、風乾させてください。

【注意】清掃中、フィエラ®を水中に浸さないようにしてください。フィエラ®がきれいな乾燥状態になったら、涼しく乾燥した場所に保管してください。極端な温度になるような場所(車の中など)に置かないでください。37℃以下の環境で使用してください。



フィエラ®リモコンの使い方

Fiera® + Remote製品を持っていれば、ハンドフリーでより便利にフィエラ®を使用することができます。

① リモコンに単4電池を2本入れてください。

② リモコンのいずれかのボタンを押して、スリープモードから回復させます。

③ フィエラ®の電源ボタンを押してください。すると、リモコンのLEDライトがフィエラ®のLEDライトと一致するようになります。

④ フィエラ®とリモコンのLEDが、緑の点灯であることを確認してください。

⑤ フィエラ®を体に装着してください。

⑥ リモコンを使って、フィエラ®の強度とパターンオプションを楽しみましょう!


もし何も使わない場合やフィエラ®本体がオフになると、1分以内にリモコンの電源も自動的にオフになります。

〈リモコンの管理〉

使用后、濡れた布か抗菌ワイプでリモコンをきれいにしてください。流水で洗ったり、水に浸けないようにしてください。


〈リモコンの電池交換〉

バッテリーのカバーを開けるには、リモコンの底にある溝を押してください。

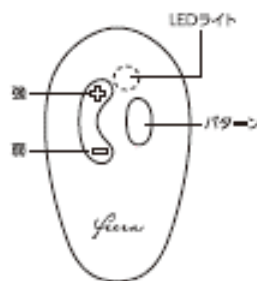

フィエラ®のアクセサリ

ソフセンス™ リングの再購入や充電キットの交換品は、Fiera.comで購入可能です。

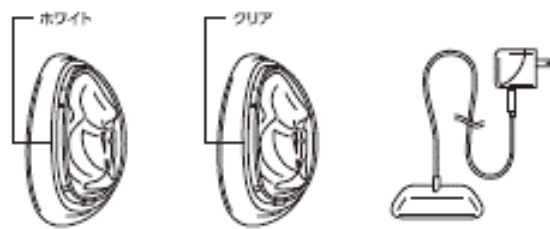

ソフセンスリング™
ホワイト

ソフセンスリング™
クリア

- ・充電キット
- ・磁気充電ケーブル
- ・ユニバーサル電源
- ・フィルター

トラブルシューティング

もしフィエラ®に関する質問や問題点がある場合は、問題を突き止めるための以下のヒントを参考にしてみてください。

それでも問題が解決しない場合は、Eメールで質問してください。

nicesupport@fiera.jp

現象	考えられる原因	解決方法
フィエラ®のLEDは緑になっているが、電波が入らない	フィエラ®を体に押し付けていない	フィエラ®は圧力を検知するため、体に押し付けられていないと動きません。腕の内側にフィエラ®を押し当て、LEDがピンクに光ることを確かめてください。
フィエラ®の電源がオンにならない	フィエラ®のバッテリーを使い切った、もしくは少なすぎた電波が入らない	フィエラ®を充電ケーブルを使って再充電してください。磁気コネクタをフィエラ®に付け、充電中にLEDが緑の点滅になることを確認してください。
フィエラ®の電源がオフにならない	電源ボタンがレギュレーションで押し込まれていない	電源ボタンの位置を確認し、LEDが消灯するまで2秒押し続けます。フィエラ®は、アイドルタイムの1分後に自動的にオフになります。
フィエラ®を充電しようとしても、LEDが緑の点滅にならない	充電元から電波が来ていない	他の電源を試してみてください。
	充電ケーブルがしっかり接続されていない	USBが確実にユニバーサル電源に挿入されていることを確かめてください。磁気コネクタが電源ボタンにしっかり接続されていることも確認してください。
	充電ケーブルが壊れている	充電ケーブルにひびや裂け目がないかチェックしてください。新しいケーブルはFiera.comで購入可能です。
フィエラ®がオフにならない	フィエラ®がオーバーヒートを起こし、再使用前に冷却が必要である	LEDが赤の点滅であれば、フィエラ®をオフにして、5分間待ってください。もう1度付けると、LED緑の点灯にはなりません。
	フィエラ®が体にうまく密着せず、時間切れになってしまふ	もしフィエラ®が時間切れになってしまったら、電源がまだついていることを確認して、再度装着して試してみてください。
LEDが緑の点灯になっていますが、密着しようとしないうちにピンク色に変わらぬ	ソフセンス™ リングが適度にはまっていない	ソフセンス™ リングはフィエラ®から熱が伝わり、隙間もない状態にならないと動きません。もしソフセンス™ リングが正しく装着されている場合、リングの中央部分できれいにピンホールが見えるはずです。
フィエラ®が使用中に止まってしまう	バッテリーが低くなりすぎた	充電してください。

現象	考えられる原因	解決方法
使用中にフィエラ®の位置が動いてしまう	フィエラ®の装着位置が間違っている	正確な場所に位置取りできるまで、何度か練習が必要です。最もよい方法は「How to Use Fiera®」と「How to Place Fiera® on Your Body」ビデオを見てください。https://fiera.jp/supportで見ることができます。フィエラ®を指輪の下においてください。一度置いたら、うまく体と密着するように、刺激が始まってからしばらくの間、手で固定しててください。ピンクの点灯になったら、密着がうまくいったサインです。
	ソフセンス™ リングにひびや裂け目がある	ソフセンス™ リングには、小さいが非常に重要なピンサイズの穴があります。その穴がしっかり存在し、裂け目がないのが正常です。新しいリングを密着く観察し、正常なリングがどのようなものなのか覚えておきましょう。
	フィエラ®がしっかりと密着するために十分な張力ができない	クリアタイプのソフセンス™ リングを使っているのであれば、ホワイトタイプを試してください。逆も同じです。もし、どちらのリングでもうまくフィットしない場合は、カスタマーサポートに連絡してください。
	ソフセンス™ リングがうまく密着しない原因がある	ウォーターベースの潤滑剤か水を使って密着性を高めてください。何か問題がある場合は、毎回一度フィエラ®をオフにして、再度オンしてください。
シリアルナンバーが知りたい		ソフセンス™ リングを取ってください。フィエラ®本体のCEマークの下に、6桁のシリアルナンバーがプリントしてあります。
フィエラ®リモコンでフィエラ®をコントロールできない	リモコンとフィエラ®がペアリングできていない	フィエラ®はリモコンとペアリングしてくれます。しかし、再ペアリングするためには、以下の手順を踏んでください。これはリモコンの再購入をした時にも同じです。 ①フィエラ®の「Pattern」と「+」ボタンを5秒間押しします。LEDが赤の点滅になります。 ②次にリモコンの「Pattern」と「+」ボタンを5秒間押しします。本体リモコンは3フィート(90cm)以内にならなければなりません。 ③リモコンとフィエラ®がペアリングできると、一時的にブルーのライトが光ります。その後、リモコンのライトがフィエラ®のライトと同調します。
リモコンの電源が入らない、もしくは、リモコンのLEDが光らない	電池がなくなっている	リモコンの単4電池を入れ替えてください。
リモコンを買いたいのですが、持っているフィエラ®のバージョンが対応しているかどうかどう調べたいか?		F2モデルがリモコン対応です。モデルが異なるには、ソフセンス™ リングを外してフィエラ®にプリントされたモデルナンバーを確認してください。「Model F2」とプリントしてあれば、リモコン対応になっています。